

Dane Techniczne:

PARAMETR:	Model AR-206	Model AR-207
Materiał:	polipropylen	aluminium / polipropylen
Siedzisko wymiar:	75x35 cm	41x22 cm
Do szerokości wanny:	40-62 cm	52-61 cm
Waga:	2,7 kg	1,5 kg
Maksymalna waga użytkownika	160 kg	110 kg

SYMBOLE:

 Wyrób medyczny	 Zapoznaj się z instrukcją	 Producent	 Wyrób spełnia wymagania UE	 Ostrzeżenie	 Nr dato / serii	 Data produkcji m-c/rok	 Nadaje się do recyklingu	 Selektywna zbiórka odpadów
--	--	--	---	--	---	---	---	---

KARTA GWARANCYJNA

Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Nr partii	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym 12- miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań elementów z polipropylenu, tworzywa (tj. ścieranie się ich w procesie eksploatacji).
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania ławki nawannowej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.**
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta. **Reklamowany wyrób musi być w należytym stanie higienicznym.**



INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

ŁAWKI NAWANNOWE

Model: AR-207 wgłębna
Model: AR-206 z uchwytem



Model: AR-206



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI - ŁAWKI NAWANNOWE

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dolażyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znacznym ułatwieniem podczas codziennych czynności toaletowych. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Ławka nawannowa z uchwytem/wgłębną jako sprzęt pomocniczy przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których, ze względów zdrowotnych standardowe korzystanie z wanny stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych a zarazem zwiększa bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych chcących dokonać czynności toaletowych w wannie.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, brak stabilizacji tułowia oraz głowy. Zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosować wyrób bez nadzoru opiekuna.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z ławki – AR-206 – **160 kg**, AR-207 – **110kg**



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy ławka oraz uchwyt (y) nie posiadają wyraźnych uszkodzeń mechanicznych (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie śruby mocujące/zatrzaski uchwyt(y) są solidnie dokręcone
3. AR-206 sprawdzenie czy ławka posiada wszystkie 4 nogi rozporowe (2), AR-207 wszystkie 4 uchwyty (1)
4. AR-206 sprawdzenie czy nogi rozporowe (2) wykonane z tworzywa klinują się o boki wanny uniemożliwiając jej przesuwanie. AR-207 sprawdzenie czy wszystkie 4 uchwyty spierają się na krawędziach wanny całą swoją powierzchnią.
5. Sprawdzenie czy zatrzaski do regulacji rozstawu (2) (trzępnie) są solidnie zamocowane.



W celu uniknięcia urazów:

1. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (wszystkich elementów przykręcanych tj. uchwyty (ów) oraz nóg rozporowych)
2. AR-206 Uchwyt ławki nawannowej (1) musi być solidnie i trwale przymocowany (za pomocą dołączonych śrub) z siedziskiem (3) AR-207 Uchwyty z regulacją (1) rozstawu muszą być solidnie zablokowane zatrzaskami (2) (trzępieniami) w rurkach znajdujących się pod siedziskiem
3. AR-206 Nogi rozporowe (2) muszą być solidnie i trwale przymocowane (za pomocą dołączonych śrub) do siedziska
4. Używać na wannie tylko w pozycji poziomej, po uprzednim „sklinowaniu” ławki w wannie za pomocą nóg rozporowych (2). Ławka po zamontowaniu nie może swobodnie przesuwać się po wannie. AR-207 po dopasowaniu szerokości uchwytów aby cała powierzchnią spierały się na krawędziach wanny.
5. Zachować szczególną ostrożność w czasie użytkowania, nie wykonywać gwałtownych przechyleń w tył
6. Zabrania się gwałtownego siadania na ławkę (m.in. wskakiwania)
7. Zabrania się przenoszenia ławki wraz z użytkownikiem
8. Zabrania się stawiania obuwia na ławce oraz którymkolwiek elemencie wyrobu.
9. Nie wolno przeciążać wyrobu, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez Producenta.
10. Zaleca się aby dno wanny wyłożone było matami antypoślizgowymi

Sposób konserwacji:

Każdorazowo po dokonaniu czynności toaletowych wyrób należy dokładnie wypłukać czystą wodą (nie pozostawiać na wyrobie mydła, szamponu, żelu do kąpieli itp., a następnie dokładnie osuszyć delikatną szmatką. Zabrania się stosowania do czyszczenia mocnych detergentów, benzyny oraz rozpuszczalników. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (np. piwnicy) w połączeniu z brakiem dokładnej konserwacji wyrobu (higieny, suszenia) będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych ławki nawannowej, a tym samym utraty gwarancji. Nie wolno używać środków ściernych!

Rozwiązywanie problemów:


W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie wyrobu jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

I. Ławka nawannowa nie jest stabilna.


- a. Czy uchwyt(y) ławki (1) jest/są solidnie przykręcony/zamocowane do siedziska (3)? Jeśli nie, należy je zamocować.
- b. AR-206 Czy wszystkie nogi rozporowe (2) są solidnie przykręcone do siedziska (3)? Jeśli nie, należy je dokręcić.
- c. AR-206 Czy wszystkie nogi rozporowe (2) przylegają do bocznych krawędzi wanny uniemożliwiając jej przesuwanie? Jeśli nie, należy je rozsunąć tak aby uniemożliwiały swobodne przesuwanie się ławki na wannie; AR-207 – czy wszystkie uchwyty z regulacją leżą całą powierzchnią na bocznych krawędziach wanny? Jeśli nie należy je rozsunąć.
- d. Wszystkie elementy wyrobu należy skrócić/złożyć w taki sposób aby po zakończeniu czynności stanowiły dokładne odwzorowanie poniższego zdjęcia wyrobu
- e. Pomimo solidnego dokręcenia wszystkich elementów za pomocą śrub montażowych wyrób nadal nie jest stabilny? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ ŁAWKI NAWANNOWEJ!!!

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE

Model: AR-207

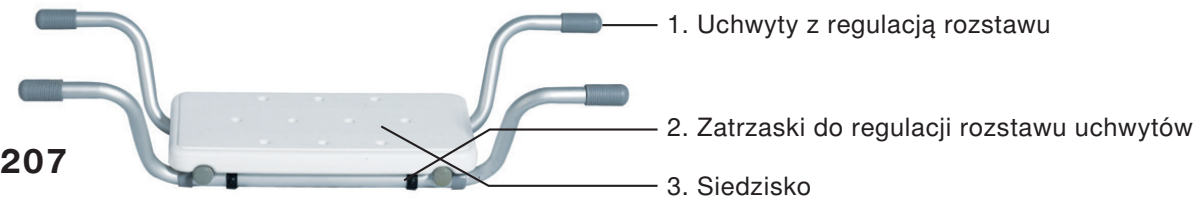

Model: AR-206

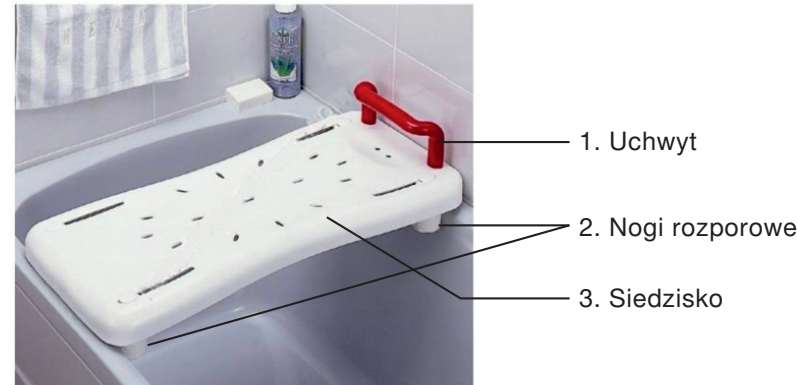

Przygotowanie do użycia:

1. Wyjąć ławkę nawannową z opakowania kartonowego lub foliowego. Wyrób wyjęty z opakowania wymaga montażu przed pierwszym użyciem.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. AR-206 położyć na podłodze lub twardej powierzchni siedzisko (3) tak aby widoczna była część górna. Chwyć uchwyt(1) i ustaw go na siedzisku (3) zgodnie z powyższym rysunkiem, w taki sposób aby otwory w uchwycie siedziska pokrywały się wzajemnie. Za pomocą wkrętaka (śrubokręta) wkręć dołączone śruby wistniejące otwory. Po zmontowaniu siedziska (3) i uchwyty (1) należy przykręcić nogi rozporowe (2). Unieść lekko siedzisko i włożyć wszystkie 4 nogi rozporowe (w miejsca zgodnie z rysunkiem), następnie od góry wkręć dołączone śruby. Po położeniu ławki na wannie należy przesunąć nogi rozporowe w kierunkach zewnętrznych tak aby „sklinowały” ławkę w wannie, uniemożliwiając jej przesuwanie. Po odpowiednim dopasowaniu rozstawu nóg rozporowych należy mocno dokręcić śruby mocujące nogi. AR-207 wyjąć uchwyty z regulacją rozstawu (1) i wsunąć je w poszczególne rurki znajdujące się pod siedziskiem (3). Każdy uchwyt (1) musi być zablokowany zatrzaskiem do regulacji rozstawu (2) (trzępień wsunięty w otwór przelotowy w rurce). Dopasować rozstaw uchwytów (1) do szerokości wanny.

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

1. Postaw ławkę nawannową w miejscu gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne, wyrób również może pozostać na wannie.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU