

Dane Techniczne:

PARAMETR:	AR-210
Rama:	aluminiowa
Kolor ramy:	srebrny
Typ/model	stały
Szerokość siedziska:	41 cm
Głębokość siedziska:	21,5 cm
Regulacja wysokości	21cm-26 cm
Waga produktu:	1,7 kg
Maksymalne obciążenie:	160 kg

SYMBOLE:								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA
Do karty należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Nr kat. Produktu / Nr LOT	

1. 1. Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań elementów z polietylenu i gumowych (tj. ścieranie się nasadek gumowych (4)).
6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania podnóżka-taboretu prysznicowego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
7. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
8. Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
9. Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta.
- Reklamowany wyrób musi być w należytym stanie higienicznym.



INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

PODNÓZEK – TABORET PRYSZNICOWY

MODEL: AR-210



ARMEDICAL Sp. z o.o.
al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI - PODNÓŻEK - TABORET PRYSZNICOWY

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dołożyliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znacznym ułatwieniem podczas codziennych czynności toaletowych. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Podnóżek - taboret prysznicowy jako sprzęt pomocniczy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których, ze względów zdrowotnych standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwiają i pomagają podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabine prysznicowej. Stosowany jako stopień ułatwia wejście do wanny osobom, które mają z tym problem z uwagi na ograniczoną zdolność ruchową.



Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej, brak stabilizacji tułowia. Zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa, niestabilność kończyn dolnych uniemożliwiająca stawanie na podnóżku. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosować wyrób bez nadzoru opiekuna.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z produktu – **160 kg**



Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie rurki są proste, nie nadłamane (np. w transporcie), czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy składowe wyrobu.
2. Sprawdzenie czy siedzisko/stopień z polietylenu nie posiada uszkodzeń np. pęknięć.
3. Sprawdzenie czy wszystkie nogi podnóżka-taboretu ustawione są na tej samej wysokości.
4. Sprawdzenie czy na wszystkich nogach znajdują się nakładki gumowe antypoślizgowe oraz czy wszystkie są prawidłowo założone.



W celu uniknięcia urazów:

1. Siedzisko/stopień z polietylenu musi być solidnie i trwale przymocowany (za pomocą dołączonych śrub (5)) z ramą aluminiową (2)
2. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem (sprawdzenie wszystkich elementów mocujących, rurek ramy wyrobu oraz nasadek gumowych)
3. Wszystkie nogi podnóżka-taboretu prysznicowego muszą być ustawione na tej samej wysokości.
4. Używać tylko na płaskim, twardym podłożu uniemożliwiającym przesunięcie się podnóżka-taboretu.
5. Zachować szczególną ostrożność na mokrej lub śliskiej powierzchni pomimo antypoślizgowych nasadek.
6. Zabrania się gwałtownego wchodzenia oraz siadania na podnóżek - taboret (m.in. wskakiwania).
7. Zabrania się przenoszenia podnóżka-taboretu wraz z użytkownikiem.
8. Nie wolno przeciągać wyrobu, przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez Producenta.

9. Należy bezwzględnie zachować szczególną ostrożność przy stawaniu na podnóżku-taborecie po zakończeniu czynności toaletowych (np. wychodzeniu z wanny). Z uwagi na pozostałość mydła lub innych środków myjących powierzchnia stopnia/siedziska może być bardzo śliska. GWAŁTOWE STAWANIE GROZI WYPADKIEM!

Sposób konserwacji:

Każdorazowo po dokonaniu czynności toaletowych wyrób należy dokładnie wypłukać czystą wodą (nie pozostawiać na wyrobie mydła, szamponu, żelu do kąpieli itp.) a następnie dokładnie osuszyć delikatną szmatką. Zabrania się stosowania do czyszczenia mocnych detergentów, benzyny oraz rozpuszczalników. Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności np. (piwnicy) w połączeniu z brakiem dokładnej konserwacji wyrobu (higieny, suszenia) będą przyczyną utraty parametrów użytkowych i estetycznych podnóżka-taboretu a tym samym utraty gwarancji. Nie wolno używać środków ściernych! Elementy gumowe antypoślizgowe, (nasadki na nogi) (4) są elementem zużywalnym i muszą być regularnie wymieniane na nowe.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. Samodzielne naprawianie wyrobu jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

I. Podnóżek - taboret prysznicowy nie jest stabilny.

- a. Czy wszystkie nogi podnóżka-taboretu są na tej samej wysokości? Jeśli nie, należy je prawidłowo ustawić.
- b. Czy wszystkie nogi posiadają nasadki gumowe (4)? Jeśli nie, należy je założyć.
- c. Czy wszystkie nasadki gumowe (4) są prawidłowo założone? Jeśli nie, należy dobrze je wcisnąć.
- d. Czy wyrób ma stabilnie przykręcony element z polietylenu do ramy (2) (dołączonymi śrubami (5))? Jeśli nie, wszystkie śruby należy ponownie mocno dokręcić. Wszystkie elementy wyrobu należy skrócić/złożyć w taki sposób aby po zakończeniu czynności stanowiły dokładne odwzorowanie zdjęcia wyrobu ze strony 1
- e. Pomimo solidnego dokręcenia wszystkich śrub (5) wyrób nadal nie jest stabilny? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. **NIE WOLNO UŻYWAĆ PODNÓŻKA - TABORETU PRZYSZNICOWEGO!!!**

Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE

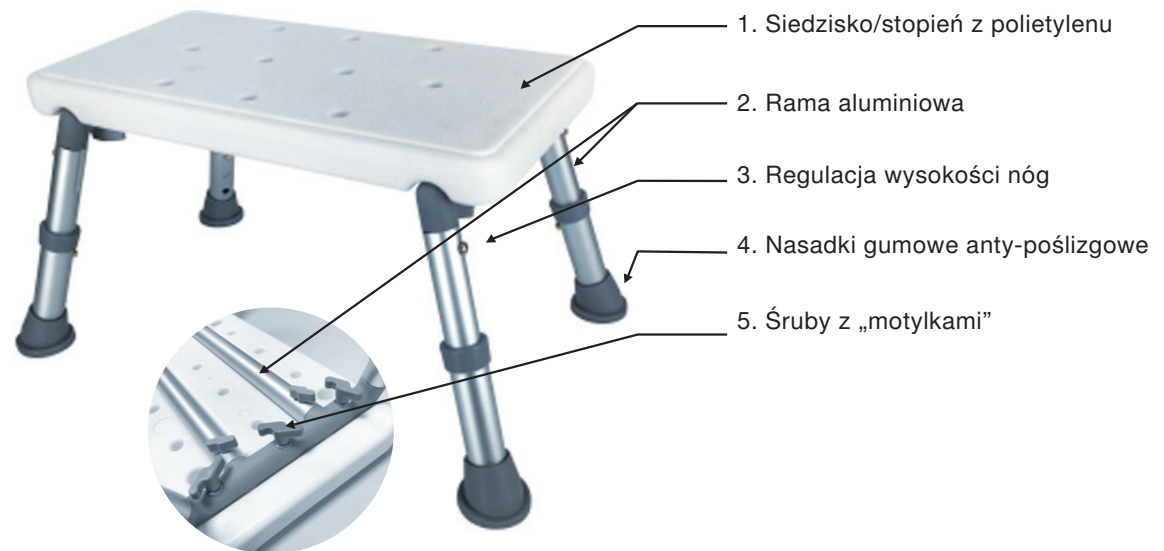

Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć podnóżek – taboret prysznicowy z opakowania kartonowego lub foliowego. Wyrób wyjęty z opakowania wymaga montażu przed pierwszym użyciem.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. Położyć na podłodze lub twardej powierzchni siedzisko/stopień (1) tak aby widoczna była część spodnia. Chwyc elementy ramy aluminiowej (2) i ustaw je nasadkami gumowymi ku górze (4), w taki sposób aby otwory w elementach ramy i siedziska podnóżka pokrywały się wzajemnie. Wkręć **wszystkie** dołączone śruby w istniejące otwory.

UWAGA! Wszystkie śruby muszą być mocno dokręcone co gwarantuje bezpieczne użytkowanie wyrobu.

4. Należy dopasować wysokość nóg podnóżka – taboretu prysznicowego do wzrostu użytkownika, w tym celu należy wcisnąć główkę zatrzasku (3) znajdującego się w nodze, co spowoduje zwolnienie blokady. Ustawić poprzez rozsuwanie lub zsuwanie rurki wymaganą wysokość. Główna zatrzasku musi wskoczyć w otwór na żądanej wysokości! Czynność powtórzyć dla wszystkich nóg. Główna zatrzasku we wszystkich nogach musi znajdować się na tej samej wysokości.

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

1. Postaw podnóżek – taboret prysznicowy w miejscu gdzie nie będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne, wyrób również może pozostać „w” lub „przy” wannie jeśli nie będzie stanowił zagrożenia potknięciem w trakcie chodzenia.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU