

Dane Techniczne:

PARAMETR:	Model AR-220
Rama:	stalowa – lakierowana proszkowo
Oparcie:	materiał siatkowy Mesh
Szerokość całkowita:	73 cm
Szerokość oparcia:	65 cm
Wysokość:	59 cm
Głębokość:	47 cm
Grubość po złożeniu:	8 cm
Waga:	2,8 kg
Maksymalna waga użytkownika	120 kg

SYMBOLE:								
								
Wyrób medyczny	Zapoznaj się z instrukcją	Producent	Wyrób spełnia wymagania UE	Ostrzeżenie	Nr dato / serii	Data produkcji m-c/rok	Nadaje się do recyklingu	Selektywna zbiórka odpadów

KARTA GWARANCYJNA
Do karty należy bezzwłocznie dołączyć dowód zakupu

Data sprzedaży	Pieczęć i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu	
Nr LOT	

- Firma ARMEDICAL Sp. z o.o. 42-520 Dąbrowa Górnicza, al. Zwycięstwa 75 udziela niniejszym 12-miesięcznej gwarancji na produkty objęte niniejszym dokumentem. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Użytkownika. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z o.o. zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia produktu do prawidłowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- ARMEDICAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu lub wysłać na adres producenta.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek czynników mechanicznych, tj. np. przecięcie materiału oparcia lub jego mechaniczne rozdarcie poprzez np. zaciągnięcie, obicie lub uszkodzenie ramy na skutek jej upadku z wysokości. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedaży w zakresie elementów zużywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowań, zadrapań elementów ramy, wycierania się materiału oparcia.
- Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania podpórki pod plecy niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi a także w przypadku przekroczenia przez użytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Użytkownika lub inne osoby nieupoważnione napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.
- Gwarancja jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu i niniejszą kartą gwarancyjną.
- Reklamację należy zgłaszać tylko i wyłącznie w formie pisemnego protokołu reklamacyjnego określającego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okolicznościami ujawnienia się wady. W przypadku nie dochowania warunków zgłaszania reklamacji określonych w niniejszej instrukcji wyłącza odpowiedzialność gwaranta. Reklamowany wyrób musi być w należytych stanie higienicznym.



INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA

PODPÓRKA POD PLECY

MODEL: AR-220



ARMEDICAL Sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 75, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Polska
tel.fax: +48 32 261 71 36, +48 783 001 111
www.armedical.pl, e-mail: biuro@armedical.pl





INSTRUKCJA OBSŁUGI - PODPÓRKA POD PLECY

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, którym nas obdarzyliście. Dodaaliśmy wszelkich starań aby nasz sprzęt spełniał Państwa oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie znaczącym ułatwieniem podczas codziennej opieki nad chorym, poprawiającym komfort i proces rehabilitacji osoby leżącej. Przed użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, która jednocześnie stanowi kartę gwarancyjną.

Przeznaczenie wyrobu:

Podpórka jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób leżących, z problemami pionizacji lub mających problem z samodzielnym utrzymaniem pozycji siedzącej. Umożliwia utrzymanie pozycji półsiedzącej bez konieczności pomocy ze strony osób trzecich. Jest produktem 2-funkcyjnym, jako środek pomocniczy niezwykle ułatwia codzienną opiekę nad chorym np. karmienie, podawanie napojów, w czynnościach higienicznych. Jako produkt rehabilitacyjny umożliwia bierną pionizację poprzez stopniowe przyzwyczajanie układu krążenia do pozycji siedzącej, zapobiega skutkom długotrwałego leżenia. Dzięki skokowej, 5-stopniowej regulacji umożliwia dostosowanie właściwego kąta nachylenia do indywidualnych potrzeb oraz możliwości osoby leżącej. Bardzo wytrzymały, elastyczny i przewiewny siatkowy materiał Mesh gwarantuje niezwykle komfort użytkowania oraz zapobiega poceniu się pleców w miejscu przylegania do oparcia. Zdecydowanie poprawia komfort pacjenta jak również osób opiekujących się nim.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do pionizacji (pozycji siedzącej), brak stabilizacji tułowia. Zaburzenia koordynacji ruchowej, równowagi, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny użytkować wyrób bez nadzoru opiekuna.

Dane użytkowe:

Maksymalny ciężar pacjenta zapewniający bezpieczne korzystanie z podpórki – **120 kg**

Uwagi i ostrzeżenia:

W celu uniknięcia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy ramy oraz materiał oparcia nie posiadają wyraźnych uszkodzeń mechanicznych (np. w transporcie)
2. Sprawdzenie czy wszystkie śruby mocujące (4) i (5) oparcie i podstawę są solidnie dokręcone
3. Sprawdzenie czy podpórka posiada obydwie szyny z zapadkami (8)
4. Sprawdzenie czy rama podparcia oparcia (7) klinuje się w szynach z zapadkami (8) uniemożliwiając jej przesuwanie. Sprawdzenie czy zapadki w szynach z zapadkami (8) są ustawione równolegle do siebie, poszczególne wycięcia na tej samej „wysokości”

W celu uniknięcia urazów:

1. Niezbędne jest każdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilności wyrobu przed użyciem m.in. wszystkich elementów przykręconych tj. poszczególnych elementów ramy (1),(6),(7), szyn z zapadkami (8) jak również solidności przymocowania materiału oparcia (3) do ramy oparcia (1).
2. Rama podparcia oparcia (7) musi być solidnie zablokowana w szynach z zapadkami (8) w określonej pozycji (w zależności od stopnia pochylecia podpórki). Musi „wskoczyć” w wycięcia szyn z zapadkami (8) w sposób całkowicie uniemożliwiający jej przesuwanie się.
3. Podstawa podpórki (6) musi spoczywać całą swoją powierzchnią na łóżku chorego, nie może być podparta częściowo. Używać na łóżku tylko w pozycji poziomej, po uprzednim upewnieniu się, że podpórka nie przesunie się pod wpływem masy ciała osoby opierającej się. Korzystający musi opierać się dokładnie na środku oparcia (NIE na krawędzi ramy oparcia (1)). Głowa powinna spocząć na poduszce pod głowę (2).
4. Zachować szczególną ostrożność w czasie użytkowania, nie wykonywać gwałtownych przechyleń w prawo lub lewo.
5. Zabrania się gwałtownego opierania o podpórkę.
6. **Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez Producenta. GROZI WYPADKIEM!!!**
7. Zaleca się aby osoba korzystająca opierała się o podpórkę w asekuracji osób trzecich.

Sposób konserwacji:

Czyścić wilgotną szmatką z zastosowaniem delikatnych detergentów np. mydła – następnie osuszyć. NIE stosować benzyny oraz rozpuszczalników. Przechowywać w pomieszczeniach suchych. NIE używać środków ściernych!

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku wystąpienia problemów prosimy przeanalizować niniejszy rozdział. Jeśli to nie pomoże prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub serwisem. **Samodzielne naprawianie wyrobu jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.**

I. Podpórka pod plecy nie jest stabilna.

- a. Czy ramy podpórki (1), (6), (7) są solidnie skręcone? Jeśli nie, należy je solidnie skręcić śrubami (4) i (5)
- b. Czy rama podparcia oparcia (7) jest solidnie umieszczona, „wciśnięta” w zapadki szyn z zapadkami (8)? Jeśli nie, należy ją wcisnąć aż do całkowitego zaklinowania.
- c. Czy rama podparcia oparcia (7) znajduje się na tej samej pozycji pochylecia obydwu szyna z zapadkami (8)? Jeśli nie, należy ją ustawić po obydwu stronach na tej samej pozycji.
- d. Czy szyny z zapadkami (8) są solidnie przykręcone do ramy podstawy (6)? Jeśli nie, należy je solidnie dokręcić.
- e. Czy pomimo prawidłowego rozłożenia oraz solidnego dokręcenia wszystkich elementów za pomocą śrub montażowych wyrób nadal nie jest stabilny? Jeśli nie, należy skontaktować się z punktem sprzedaży. NIE WOLNO UŻYWAĆ PODPÓRKI POD PLECY!!!

Incydenty:

Każdy **poważny** incydent związany z wyrobem należy zgłosić do producenta, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Utylizacja:

Wyrób nie nadający się do dalszego użytkowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobów.

Zaprzestanie używania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zużycia materiału należy przestać użytkować wyrób.

ELEMENTY SKŁADOWE / UŻYTKOWE

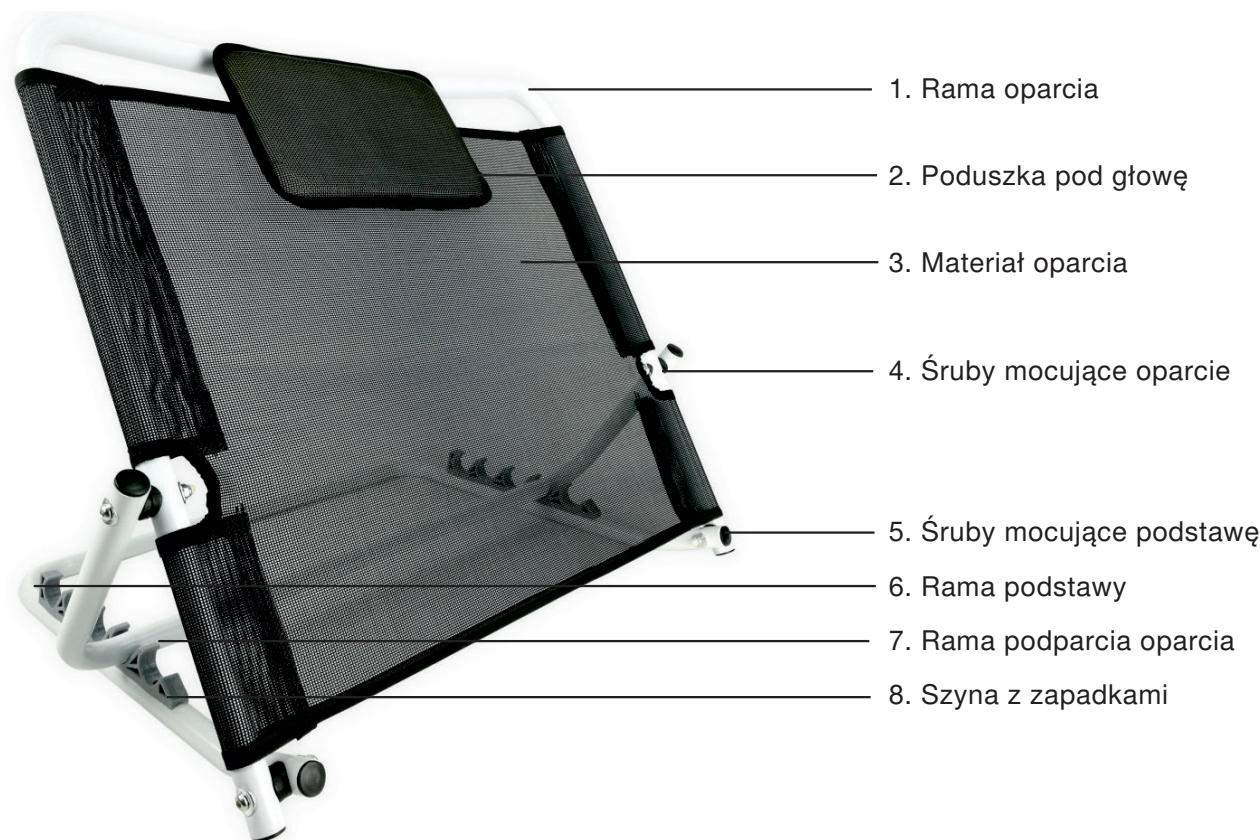

Przygotowanie do użycia

1. Wyjąć podpórkę pod plecy z opakowania kartonowego lub foliowego. Wyrób wyjęty z opakowania nie wymaga montażu przed pierwszym użyciem.
2. W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. **Uwagi i ostrzeżenia**.
3. Położyć na podłodze lub bezpośrednio w górnej części łóżka chorego (za plecami). Chwycić ramę oparcia (1) i rozłożyć podpórkę zgodnie z powyższym zdjęciem. Umieścić ramę podparcia oparcia (7) w szynach z zapadkami (8) na żądanej pozycji. Należy przypiąć poduszkę pod głowę (2) na właściwej pozycji (mocowanie na rzep). Po rozłożeniu podpórka musi wyglądać dokładnie jak na powyższym zdjęciu.

Ewentualnie w celu uzyskania dokładnych instrukcji dotyczących odpowiedniego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedaży.

Zakończenie użytkowania:

1. Złożyć podpórkę i położyć w miejscu gdzie nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne oraz zawilgocenie.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. W przypadku zabrudzeń zastosuj się do punktu „Sposób konserwacji” niniejszej instrukcji.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU