



KOD KATALOGOWY	AM-D-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	AM-D-08
CODE	AM-D-08
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	AM-D-08

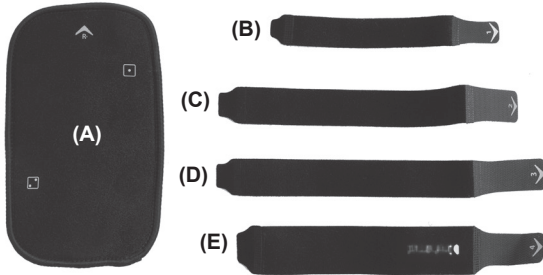

A. Usztywnienie ręki / Hand support
B,C,D,E. Taśmy / Straps

1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

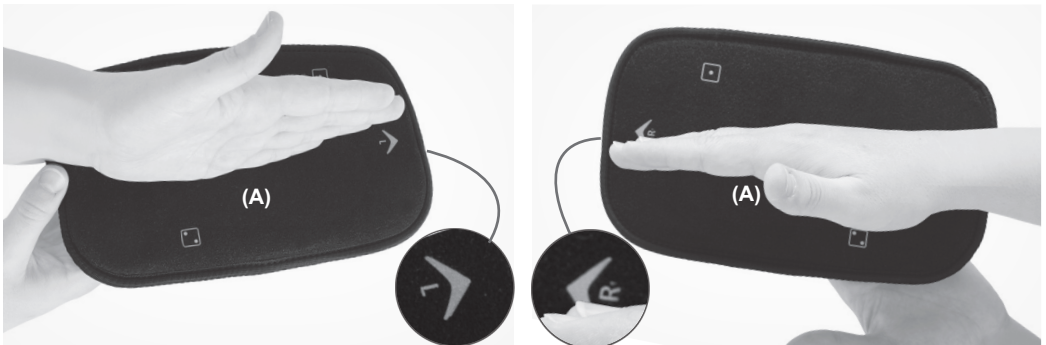


2. PL: Umieść dłoń na ortezie (A) w kierunku oznaczonym strzałką oraz stroną (lewa / prawa).
EN: Place the hand on the brace (A) in the direction indicated by the arrow and according to the side (left / right).







3. PL: Zegnij ortezę wzdłuż oznaczenia strzałki (R,L) (1). Następnie wygnij ortezę zgodnie z naturalnym ułożeniem dłoni (2) i przedramienia (3). Miejsca przegięcia oznaczone są kostkami domino.

EN: Bend the brace along the arrow marking (R, L) (1). Then curve the brace to match the natural alignment of the hand (2) and forearm (3). The bending points are indicated by domino dots.

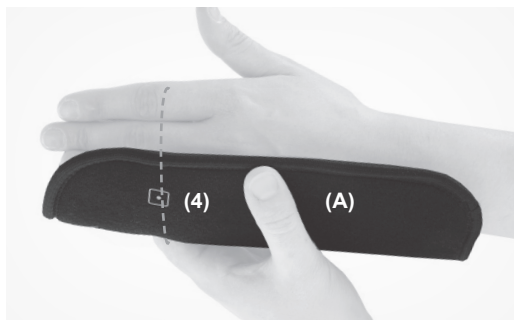

4. PL: Włóż rękę w ortezę (A) w odpowiednim miejscu (4).

EN: Insert your hand into the brace(A) at the appropriate position (4).

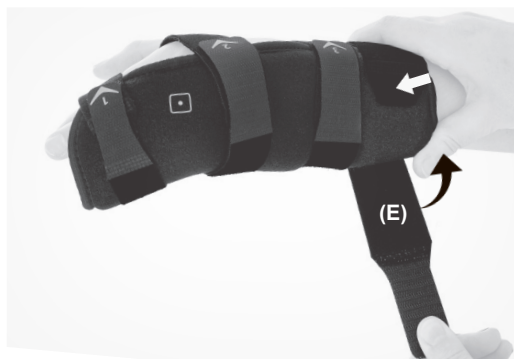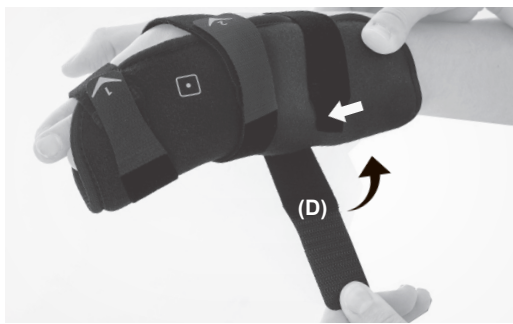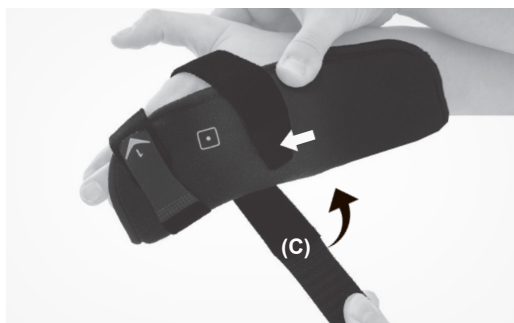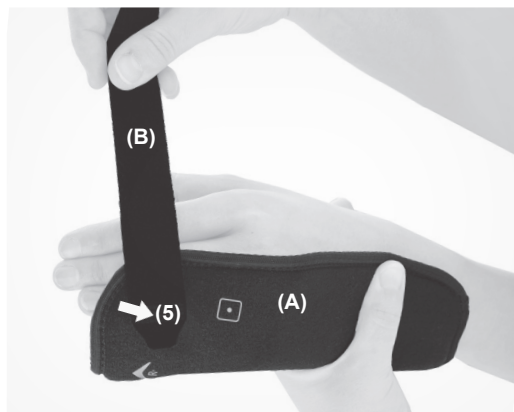

5. PL: Zapnij paski według kolejności opisanej na rzepach (1-4). Przypnij rzep (5) do ortezi, opleć pasek wokół palców, ustaw odpowiednie napięcie i zapnij rzep oznaczony nr.1. W ten sam sposób zapnij pozostałe paski.

EN: Fasten the straps in the order indicated on the Velcro tabs (1-4). Attach Velcro (5) to the brace, wrap the strap around the fingers, adjust the appropriate tension, and secure Velcro no. 1. Fasten the remaining straps in the same way.



6. PL: Gotowy produkt.

EN: The product is ready to use.