



ZNAJDŹ IDEALNE  
**DOPASOWANIE**

Przewodnik jak zmierzyć  
i odpowiednio dobrać  
pasy Neoflex.

## Neo 00 Uniwersalny

- Neo 00.01** Pas wielofunkcyjny  
**Neo 00.02** Przedłużenie pasa wielofunkcyjnego

## Neo 20


- Neo 20.01** Kamizelka na klatkę piersiową – szeroka  
**Neo 20.02** Kamizelka na klatkę piersiową zapinana na zamek – szeroka  
**Neo 20.03** Kamizelka na klatkę piersiową – wąska  
**Neo 20.04** Kamizelka na klatkę piersiową zapinana na zamek – wąska  
**Neo 20.05** Pasy naramienne  
**Neo 20.06** Połączone pasy naramienne w kształcie litery „H”  
**Neo 20.07** Pas piersiowy

## Neo 30

- Neo 30.01** 2-punktowy pas biodrowy  
**Neo 30.02** 4-punktowy pas biodrowy  
**Neo 30.03** Uprząż odwodząco stabilizująca

## Neo 40

- Neo 40.01** Pas wspierający łydkę  
**Neo 40.02** Stabilizacja kostki

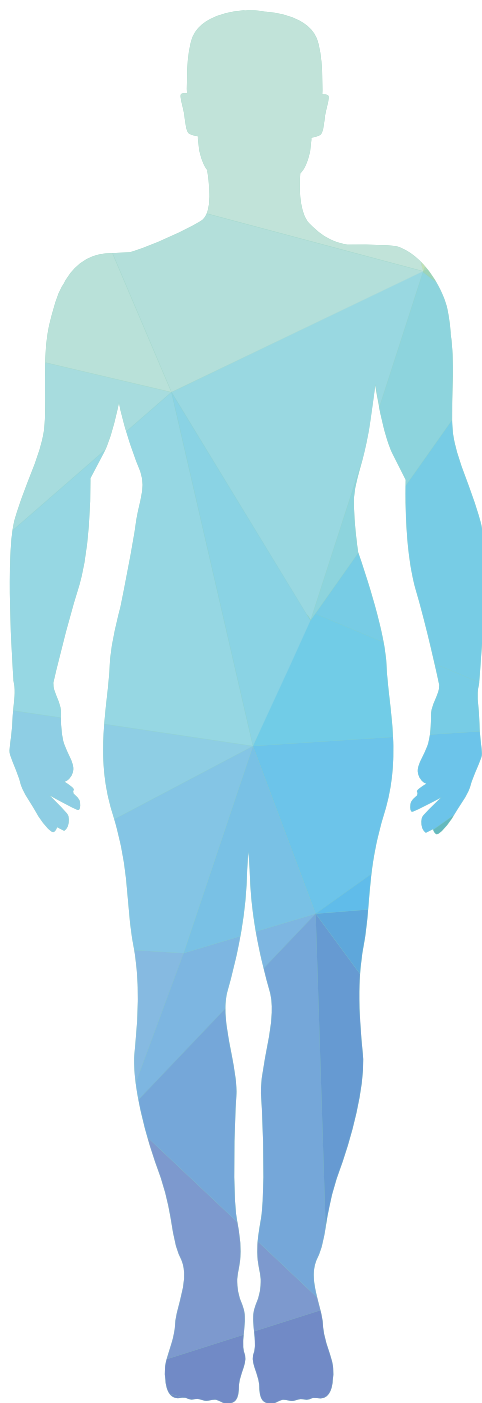

Neo 20

Neo 30

Neo 40



# JAK ZMIERZYĆ?

**Neo 00.01** Pas wielofunkcyjny

**Neo 00.02** Przedłużenie pasa wielofunkcyjnego

Zmierz całkowity obwód klatki piersiowej + oparcie, dodaj dodatkowe 15-20 cm i wpisz ten wymiar do poniższej tabeli, aby znaleźć odpowiedni rozmiar.



| A       | Rozmiar |
|---------|---------|
| <80 cm  | S       |
| <120 cm | M       |
| <140 cm | L       |
| <160 cm | XL      |

# JAK ZMIERZYĆ?

**Neo 20.01** Kamizelka na klatkę piersiową – szeroka

**Neo 20.02** Kamizelka na klatkę piersiową zapinana na zamek – szeroka

**Neo 20.03** Kamizelka na klatkę piersiową – wąska

**Neo 20.04** Kamizelka na klatkę piersiową zapinana na zamek – wąska



Zmierz **szerokość** **klatki**  
**piersiowej** „**pod pachami**” i wpisz  
ten wymiar do poniższej tabeli, aby  
znaleźć odpowiedni rozmiar.



| B      | Rozmiar |
|--------|---------|
| >24 cm | XS      |
| >26 cm | S       |
| >32 cm | M       |
| >39 cm | L       |
| >46 cm | XL      |

# JAK ZMIERZYĆ?

**Neo 20.05** Pasy naramienne

**Neo 20.06** Połączone pasy naramienne w kształcie litery „H”



Zmierz całkowitą długość od górnej części ramienia do podstawy łokcia i wpisz ten wymiar do poniższej tabeli, aby znaleźć odpowiedni rozmiar.



| A        | Rozmiar |
|----------|---------|
| 25-30 cm | S       |
| 31-37 cm | M       |
| 38-40 cm | L       |
| 41-45 cm | XL      |

# JAK ZMIERZYĆ?

**Neo 30.01** 2-punktowy pas biodrowy

**Neo 30.02** 4-punktowy pas biodrowy





**Zmierz szerokość miednicy** i wpisz ten wymiar do poniższej tabeli, aby znaleźć odpowiedni rozmiar. Przy dobrze dopasowanym wózku jest to również szerokość wózka.

| A        | Rozmiar |
|----------|---------|
| 25-33 cm | XS      |
| 31-40 cm | S       |
| 39-52 cm | M       |
| 48-65 cm | L       |

# JAK ZMIERZYĆ?

## Neo 30.03 Uprząż odwodząco stabilizująca

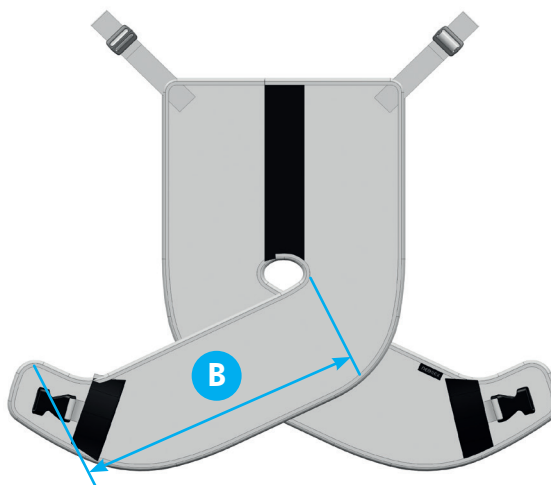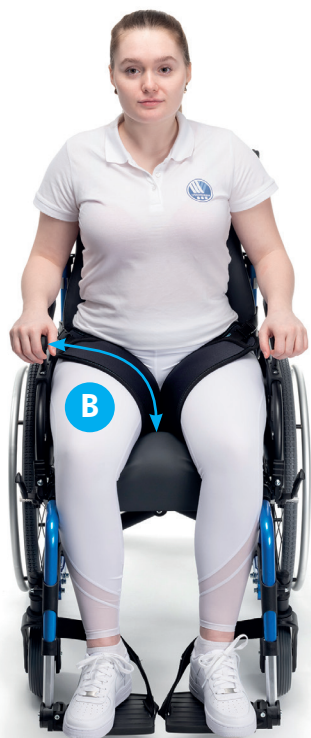

**Zmierz odległość od siedziska do zewnętrznej części uda,** jak pokazano na rysunku, i wpisz ten wymiar do poniższej tabeli, aby znaleźć odpowiedni rozmiar.

| B        | Rozmiar |
|----------|---------|
| 17-24 cm | XS      |
| 24-26 cm | S       |
| 27-32 cm | M       |
| 33-38 cm | L       |

# JAK ZMIERZYĆ?

## Neo 40.01 Pas wspierający łydkę

**Zmierz odległość pomiędzy rurkami podnóżka** i wpisz ten wymiar do poniższej tabeli, aby znaleźć odpowiedni rozmiar.



| A        | Rozmiar |
|----------|---------|
| 18-24 cm | S       |
| 25-32 cm | M       |
| 33-40 cm | L       |
| 40-50 cm | XL      |

# JAK ZMIERZYĆ?

## Neo 40.02 Stabilizacja kostki

**Zmierz obwód kostki i wpisz ten wymiar do poniższej tabeli, aby znaleźć odpowiedni rozmiar.**



|       | Rozmiar |
|-------|---------|
| 14-17 | XS      |
| 17-20 | S       |
| 19-23 | M       |
| 22-29 | L       |
| 28-33 | XL      |

